


INSTRUKCJA OPENCAP

- 1) Rozłożyć sprzęt według taśm naklejonych na ziemię
- 2) Włączyć aplikację OpenCap na komputerze
- 3) Połączyć oba telefony z aplikacją i dopiero potem umieścić je na tripodach

1. Install or update to [OpenCap app](#) from the App Store
2. Open the app and scan the QR code
3. Mount your phone vertically or horizontally (unlock portrait orientation) on a tripod
4. Position the tripod and camera to capture the volume of interest
5. Repeat 1-4 for all phones you want to connect
6. Have the person practice the activity and verify that they are fully in view of at least 2 cameras




- 4) Położyć plansze do konfiguracji **NAJBARDZIEJ PIONOWO** jak się da

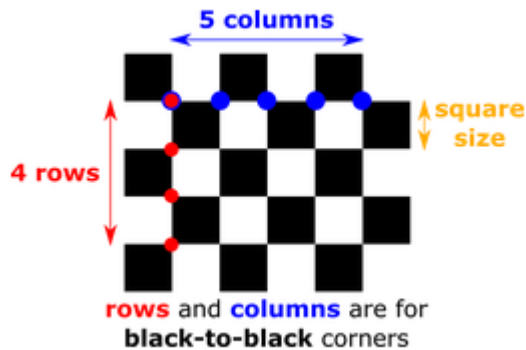

- 5) Włączyć konfigurację na laptopie poczekać aż się skończy

Create a New Session

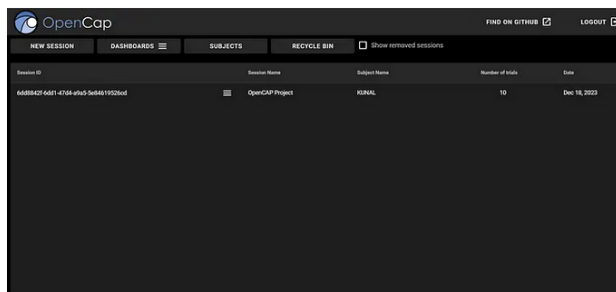

- 6) Wpisać wszystkie dane pacjenta
ID: numer np. B001
Waga z pomiarów
Wzrost z pomiarów
Rok urodzenia
Nazwa próby wpisać numer pacjenta np. B001

Create new subject

Name

Weight (kg)

Height (m)

Birth year (yyyy)

Sex assigned at birth (Optional)


Gender (Optional)

Characteristics (Optional)


☐ I, the research Participant, have provided informed consent to the research Investigator conducting this study. I have read and I agree to the [Terms and Conditions](#) and [Privacy Policy](#) of the OpenCap tool.

- 7) Ustawić pacjenta w ustalonej odległości i poprosić aby stał nieruchomo do momentu aż kalibracja się zakończy

Pacjent ma być w krótkich spodenkach, bluzce jak najbardziej opinającej i boso

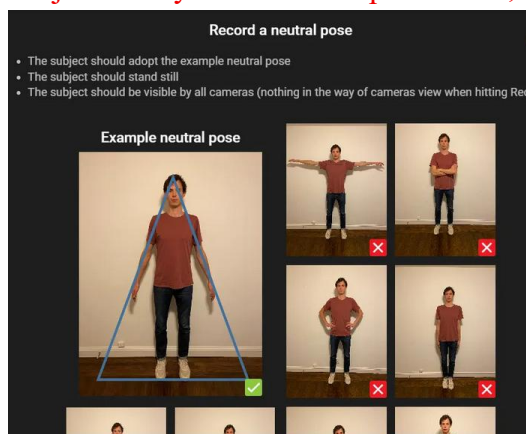

- 8) Sprawdzić zapis pod tytułem Neutral , zwrócić uwagę aby pacjent nie był przechylony do przodu ani do tyłu, sprawdzić czy szkielet jest kompletny

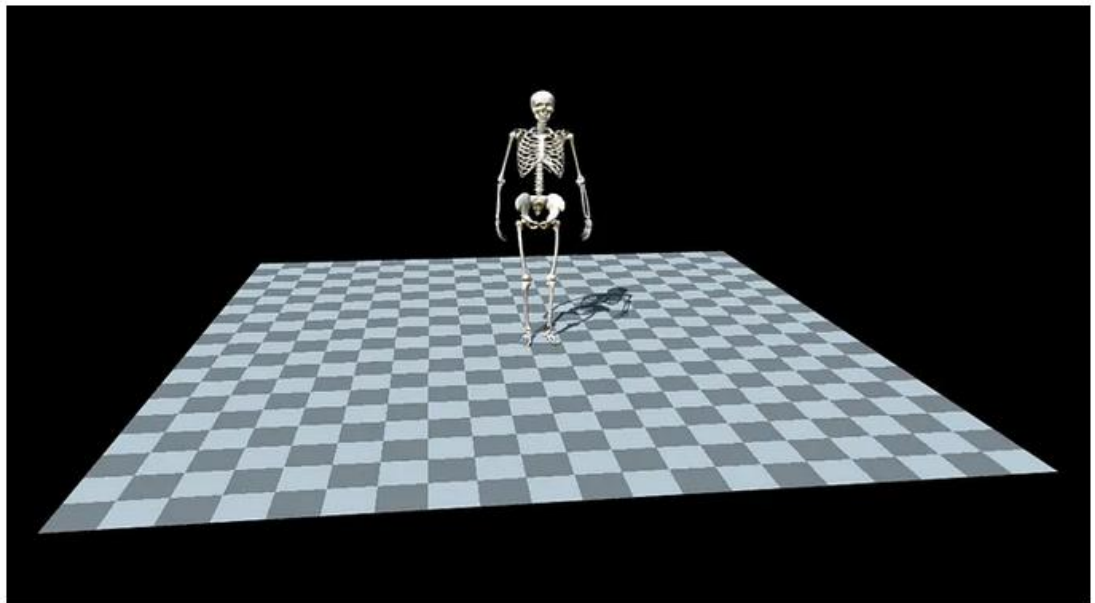

Neutral Pose as shown on OpenCap

- 9) Wy tłumaczyć pacjentowi 1 zadanie czyli single leg squat
Pacjent może wykonać jedną próbę testową aby poczuł ruch, zwrócić uwagę aby nie wychylał tułowia do przodu
Każda próba powtarzana 3 razy
- 10) Wy tłumaczyć pacjentowi Counter Movement Jump tak samo 1 próba testowa nie nagrywana, następnie 3 próby testowe
- 11) **PACJENT ZAKŁADA BUTY** i tłumaczymy side jump
Pacjent może wykonać 1 próbę testową pozostałe 3 właściwe nagrywamy

NAJWAŻNIEJSZE

Instrukcje do pacjenta :

Pacjent na hasło „POZYCJA” przyjmuje odpowiednią pozycję do startu próby, następnie operator klika start nagrywania. Po naciśnięciu guzika zaczynamy odliczać od 3 do 1 tak aby czas nagrywania ruszył od 0 . Najlepiej żeby pacjent rozpoczął ruch w momencie gdy zegar wskazuje 0:02.

Sposób opisywania prób po kolei

SLS_P_001

SLS_P_002

SLS_P_003

SLS_L_001

SLS_L_002

SLS_L_003

CMJ_001
CMJ_002
CMJ_003
SD_P_001
SD_P_002
SD_P_003
SD_L_001
SD_L002
SD_L_003

Po każdym badaniu upewnić się czy wszystkie kropki świecą się na żółto, jeżeli jakaś świeci się na czerwono to trzeba powtórzyć próbę. W przypadku gdy jakaś kropka świeci się na zielono to należy obejrzeć próbę czy wszystko jest ok

Kolejny pacjent wymaga powtórzenie kroków od 4 czyli od ponownej konfiguracji sprzętu. Rozpoczynamy proces klikając przycisk „New Session”